

## Afine su silueta y haga desaparecer su celulitis con Cellu-cup® Mini

### Contraindicaciones del uso del Cellu-cup Mini

- Presencia de tumor maligna o benigna, cancer.
- Presencia de varices en la zona a tratar.
- Estado febril e inflamatorio.
- Toma de anticoagulantes orales o inyectables.
- Hipertensión arterial.
- Patologías dermatológicas, lesiones cutáneas, heridas, quemaduras.
- Patologías sanguíneas.
- Patologías circulatorias.
- Reacciones alérgicas, eczema incluso eczema de contacto.
- Presencia de una gran cantidad de lunares sobre la zona a tratar.

En caso de duda consulte su médico.

### Zona de uso del Cellu-cup Mini:

- Cellu-cup Mini es especialmente adecuado para la parte posterior de los brazos (prevención del efecto «bat»), dentro de los muslos, las pantorrillas y alrededor de la rodilla. Sin embargo, puede usarse en todas las demás áreas de Cellu-cup Original (piernas y muslos, caderas, vientre, glúteos, área cervical ...) con menos intensidad (profundidad de masaje diferente).
- El Cellu-cup Mini no debe en ningún caso ser aplicado sobre las zonas siguientes : glándulas mamarias, mucosas, ojos y zonas genitales.

### Recomendaciones particulares del Cellu-cup Mini

- Prohibido utilizar en mujeres embarazadas en la zona del abdomen.
- Prohibido utilizar debajo de 16 años.
- Prohibido utilizar sobre las zonas de inyección en personas que padecen de diabetes insulodependiente.
- Prohibido utilizar después de sesión de rayos UV o de una exposición solar.
- Prohibido dejar al alcance de los niños o de los animales.
- Utilizar y conservar el Cellu-cup Mini a temperatura ambiente. Prohibido exponer el Cellu-cup a temperaturas inferiores a 0°C-32°F y superiores a 45°C-113°F (riesgo de deterioro de la silicona).
- Prohibido quemar o agujerear el Cellu-cup Mini.
- Prohibido congelar o exponer a aparatos que calientan.
- Prohibido limpiar con un producto abrasivo y/o corrosivo. Utilizar sólo productos cosméticos para la limpieza del Cellu-cup Mini.
- Prohibido ingerir todo o parte del producto.

### Antes de empezar:

Algunos minutos de preparación:

Para lograr su masaje, no debe **NUNCA UTILIZAR** su Cellu-cup Mini **SOBRE UNA PIEL SECA**. Para que pueda deslizarse y que pueda masajearse, tiene entonces que:

- untar (aceite de masaje) o poner crema (crema adelgazante) sobre la zona que tratar,
- o si prefiere, realizar su masaje bajo la ducha aprovechando del agua jabonosa.

### Lograr su pliegue de piel:

Para efectuar el palparrodar, hace falta lograr el «pellizco» de la piel es decir, el pliegue que desplazará y hará rodar en un segundo tiempo. Para lograr este pliegue de piel:

- pellizque fuertemente su Cellu-cup Mini para quitar el aire que contiene.
- aplique el Cellu-cup Mini contra su piel, del lado de las paredes redondeadas, sin soltarlo.
- suelte el Cellu-cup Mini: un pliegue de piel aparece dentro, ¡Lo ha logrado!

Puede también referirse al video sobre [www.cellu-cup.com](http://www.cellu-cup.com) para lograr esta etapa.

### Protocolo de masaje:

Advertencia : la piel ne debe ser seca.


- Mueva el Cellu-cup Mini (no lo deje estático para evitar el riesgo de hematoma) sobre la zona que tratar en un sentido (horizontal) y luego en el otro (vertical).
- Sobre la misma zona, efectúe movimientos en forma de «S» o pequeños círculos. Estos movimientos se pueden realizar independientemente del área a tratar limitando el tiempo de masaje a 3 minutos para las áreas sensibles. Esto es una indicación, para adaptarse dependiendo del área a tratar y la importancia de su celulitis.

Puede también referirse al video sobre [www.cellu-cup.com](http://www.cellu-cup.com) para lograr esta etapa.

**Advertencia:** El masaje puede ser doloroso. Si tal es el caso reduzca el pliegue de piel pellizcando menos fuerte el Cellu-cup y reduzca el tiempo de masaje. Cuando el masaje se vuelva menos doloroso (4-5 sesiones), podrá repetir el pliegue de piel más importante y seguir aumentando el tiempo de masaje.

**Cellu-cup Mini o Original :** Cellu-cup Mini para áreas pequeñas de difícil acceso o para comenzar si tiene miedo al dolor. Cellu-cup Original para grandes áreas (desde el muslo hasta la cadera, a través de las nalgas y el vientre) o continuar con un masaje más profundo una vez acostumbrado a la sensación con Cellu-cup Mini.

### Protocolo:

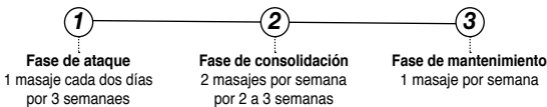

### Efectos secundarios:

- **Normales:** manchas rojas de la piel - sensación de picazones, vinculada con el aumento de la vascularización de la zona tratada. Estos efectos desaparecen en los minutos que siguen al final del masaje.
- **Frecuentes:** aparición de pequeños hematomas. Si éstos no son dolorosos, puede seguir el tratamiento habitual. En el caso contrario alargue un poco las sesiones hasta que se acostumbre su piel.
- **Poco frecuentes:** irritación cutánea - mancha roja persistente.

Le recordamos que la pérdida de su celulitis implica el masaje regular Cellu-cup Mini asociando una dieta alimenticia equilibrada así como una práctica deportiva adaptada.

Cellu-cup declina toda responsabilidad en caso de no respeto de estas indicaciones de uso.

Cellu-cup declina también toda responsabilidad en caso de aparición de varicosidades. En condiciones normales de uso y de limpieza, la duración de vida de este producto es en promedio de 18 meses. Usted debe renovar su Cellu-cup cuando la silicona se está volviendo difícil y/o su color original ha cambiado.